

AUSILI PER BAGNO

BATHROOM EQUIPMENTS AND HANDRAIL



 GIVAS

DISEGNO E CREATIVITÀ

design and creativity

La GIVAS si ripropone sul mercato con un innovativo ed ampliato programma di ausili bagno nelle sue varie forme, dai supporti fissi e regolabili, ai rialzi wc ed agli sgabelli, con le nuove e rinnovate carrozzine doccia nelle varie soluzioni per vasca, dal sedile regolabile in altezza, al girevole, ai supporti fissi, fino ad arrivare al modulo per il bagno e corridoi. Il tutto permette di attrezzare l'ambiente bagno con la massima sicurezza, e completarlo per ogni esigenza tecnica e funzionale, pur mantenendo un armonioso abbinamento nell'ambiente in cui è inserito.

GIVAS re-purpose on the market with an innovative and enlarged program of bath aids in its various forms, from the fixed and adjustable supports, to the raised toilets and shower benches, the new and improved shower wheelchair in the different solutions for bathtub, from seat adjustable in height, to revolving one to fixed supports, till bathroom and corridors handrails. In this way, it's possible to fit out the bathroom with the maximum safety and complete it for any technical and functional request, every assuring an harmonious coupling in the "habitat bath", in which it's integrated.

QUALITÀ, TECNICA E COMFORT

quality, technique and comfort

I materiali impiegati per la produzione della nuova linea bagno GIVAS sono in tubolare Ø 30 in lega di alluminio ad alta resistenza, con rinforzi nei punti di maggior sforzo. Il nuovo trattamento esterno è trattato a polveri termoplastiche con spessore medio di 200 micron; è un prodotto atossico, isolante, resistente all'impatto con bassa tossicità in caso di incendio. Nuovo il sistema di fissaggio con ghiera in nylon interposta tra muro e ausilio, abbinata al pratico coprivate, anch'esso in nylon. Notevole riguardo è stato rivolto a tutto il programma SICUREZZA, nelle forme continue e arrotondate, prive di spigoli, garantendo una gradevole e sicura presa delle maniglie.

The materials used for the production, of the new GIVAS bath-line, is made of tubular aluminium alloy Ø 30, high resistance, reinforced in the points of the main effort. The new external cover is realised by thermoplastic powders, medium thickness of 200 micron; it's a non-toxic product, insulating and impact-resistant with low toxicity in case of fire. New fixing system made by nylon nut, inserted through wall and handrail, coupled to practical nylon screws-cover. Remarkable attention was dedicated on all SAFETY programm, in the continous and rounded forms, without corners, guaranting a safe of handles.





GY7000

Impugnatura di sicurezza orizzontale piccola.

Safety horizontal handgrip small.

GY7002


Impugnatura di sicurezza orizzontale media.

Safety horizontal handgrip medium.

GY7004

Impugnatura di sicurezza orizzontale grande.


Safety horizontal handgrip large.

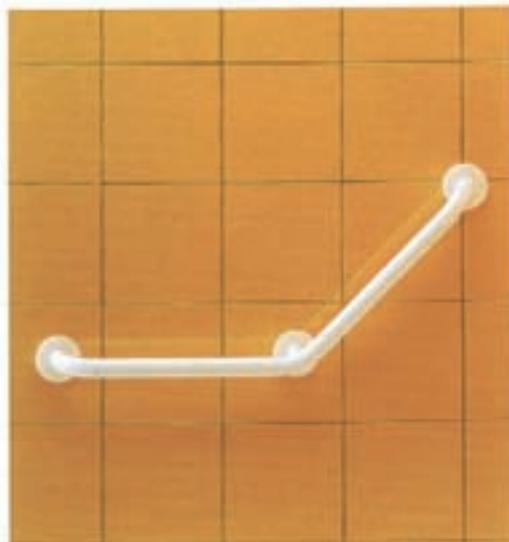

GY7006

Impugnatura di sicurezza inclinata dx e sx piccola.

Reclined safety handgrip right and left small.

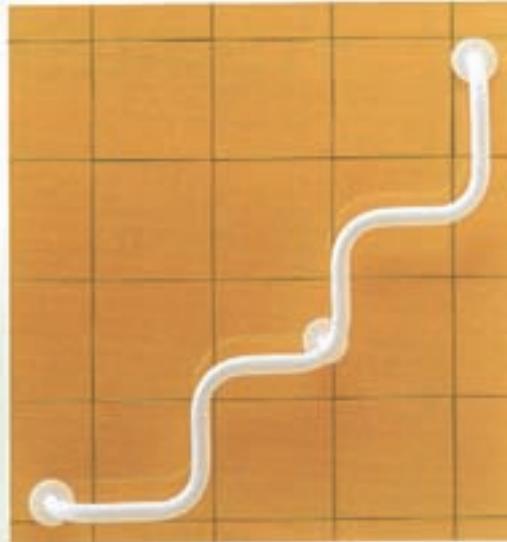

GY7020

Impugnatura di sicurezza a salire.

Safety handgrip for uprising.



GY7034

Supporto di sicurezza a ribalta piccolo.

Upsettable safety support small.

GY7036

Supporto di sicurezza a ribalta grande.

Upsettable safety support large.



GY7048


Supporto di sicurezza regolabile piccolo.

Upsettable adjustable safety support small.

GY7050

Supporto di sicurezza regolabile grande.

Upsettable adjustable safety support large.

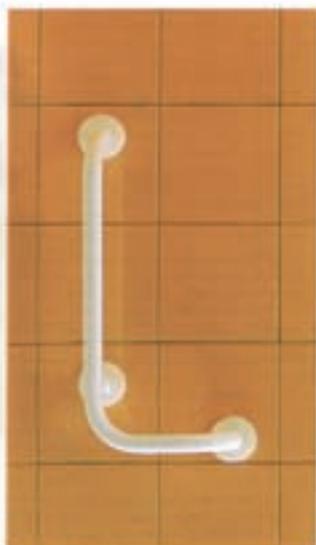

GY7012

Impugnatura di sicurezza ad angolo sx piccola.

Angled safety handgrip left, small.

GY7014

Impugnatura di sicurezza ad angolo dx piccola.

Angled safety handgrip right, small.

GY7016


Impugnatura di sicurezza ad angolo sx grande.

Angled safety handgrip left, large.

GY7018

Impugnatura di sicurezza ad angolo dx grande.

Angled safety handgrip right, large.

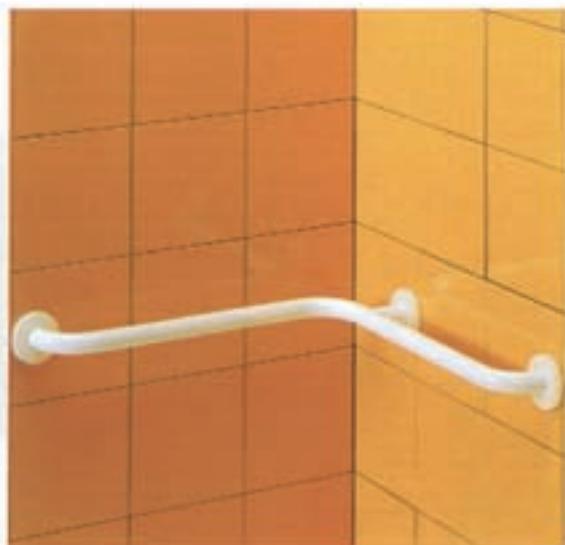

GY7008

Impugnatura di sicurezza ad angolo orizzontale.

Angled safety horizontal handgrip.



GY7022

Impugnatura di sicurezza a doppio angolo piccola dx o sx.

Double angled safety handgrip right, left small.

GY7024

Impugnatura di sicurezza a doppio angolo grande dx o sx.

Double angled safety handgrip right, left large.



GY7030

Supporto di sicurezza fisso piccolo.

Fix safety support small.

GY7032

Supporto di sicurezza fisso grande.

Fix safety support large.



GY7040

Supporto di sicurezza con staffa a pavimento piccolo dx.

Safety support with floor bracket small right.

GY7044

Supporto di sicurezza con staffa a pavimento piccolo sx.

Safety support with floor bracket small left.



GY7052

Rialzo stabilizzatore per wc

Braccioli in nylon, sedile in ABS, regolabile in altezza, adattabile a tutti i tipi di wc, tappi antiscivolo alla base.

Toilet support

Nylon armrests, ABS seat adjustable in height, fits around all wc, antislip plugs at the base.



GY7056

Supporto di sicurezza a poltroncina

Schienale di appoggio orientabile in materiale plastico imbottito e rivestito, contenitore a comoda con coperchio ad invasatura, gambe regolabili, tappi antiscivolo alla base.

Toilet safety support with backrest

Adjustable backrest made of plastic material padded and upholstered, pail with cover, adjustable legs, antislip rubber plugs.



GY7061

Rialzo per wc con braccioli

Realizzato in materiale plastico lavabile e disinfettabile con tavoletta, coperchio e braccioli a ribalta, montabile su tutti i tipi di wc attraverso i fori posteriori della porcellana. Il rialzo è dotato di coperchio di chiusura in materiale plastico rigido, tavoletta in materiale flessibile e maniglioni a ribalta in tubo di acciaio verniciato completi di poggia braccia in PVC. Rialzo da 100 mm.

Raised toilet seat with armrests

Toilet support made of plastic, washable and disinfectable material; cover and folding arms adaptable to all kind of WC by back holes of the porcelain. The support is equipped of a closing cover made of stiff plastic material; flexible WC tablet; folding handles made of varnished steel tube and completed by PVC armrests. Support height 100 mm



GY7059

Rialzo per wc

Realizzato in materiale plastico lavabile e disinfettabile con coperchio a ribalta adattabile su tutti i tipi di wc mediante ganci laterali di sicurezza a scatto. Coperchio in materiale plastico flessibile con chiusura a tappo e foro frontale per apertura. Rialzo da 100 mm.

Raised toilet seat

Toilet support made of plastic, washable and disinfectable material; folding cover adaptable to all kind of WC by lateral and click safety hooks. Flexible cover with cap closing and frontal hole for opening. Support height 100 mm



GY7057

Rialzo per wc universale

realizzato in materiale plastico lavabile e disinfettabile senza coperchio adattabile su tutti i tipi di wc mediante ganci laterali di sicurezza a scatto. Rialzo da 100 mm.

Universal raised toilet seat

Toilet support made of plastic, washable and disinfectable material; without cover, adaptable to all kind of WC by the lateral and click safety hooks. Support height 100 mm.



GY7054

Rialzo stabilizzatore per wc

Braccioli in nylon, sedile in legno, braccioli e gambe regolabili in altezza, tappi antiscivolo alla base.

Toilet support

Nylon armrests, wooden seat armrests and legs adjustable in height, antislip rubber plugs.



GY7068

Sostegno a parete

Struttura in tubo di acciaio trattata a polveri epossidiche a 250°C, parte girevole registrabile a mezzo volantino, triangolo anatomico in ABS stampato, ausilio per vasca e bidet.

Wall mounted support

Steel tubing frame covered with epoxy-powders, turning part adjustable by little steering-wheel, ABS contoured hand-bar, suspending strap, aid for bathtub and bidet.



GY7064

Maniglia di sicurezza per vasca

Struttura in acciaio inox trattata a polveri epossidiche a 250°C, volantino di bloccaggio realizzato per facilitare l'entrata e l'uscita dalla vasca.

Safety bathtub rail

Steel frame covered with epoxy-powders, locking device, made to make easier going into and out of the bathtub.



GY7066

Supporto di sicurezza laterale per vasca

Regolabile in altezza, volantini di bloccaggio, tappi antiscivolo alla base.

Side safety bathtub rail

Adjustable in height, locking device, plugs at the base.



GY7070

Sedile per vasca standard

Adattabile a tutti i tipi di vasca, sedile in nylon anatomico con particolare apertura centrale per pulizie personali, quattro tappi di appoggio antiscivolo e antigraffio.

Bathtub standard seat

Fits any type of bathtub, nylon contoured seat with special opening in the middle for own cleaning, 4 supports plugs antislip and anti-scratches.



GY7071

Sedile per vasca standard

Modello analogo al GY7070, con schienale di appoggio.

Bathtub standard seat

Model as art. GY7070, with backrest.



GY7098

Sedile morbido.

Soft seat.



GY7078

Sgabello doccia

Sedile in nylon con particolari aperture per pulizie personali, gambe regolabili, tappi antiscivolo alla base.

Shower bench

Nylon seat with special openings for own cleaning, adjustable legs antislip plugs at the base.



GY7080

Sedia doccia

Sedile e schienale in nylon con particolari aperture per pulizie personali, gambe regolabili, tappi antiscivolo alla base.

Shower chair

Nylon seat and backrest with special openings for own cleaning, adjustable legs antislip plugs at the base.



GY7076

Sedia per vasca

Realizzata per consentire alla persona con scarsa mobilità, di trasferirsi in maniera autonoma dalla carrozzina alla vasca. Sedile, schienale e braccioli in nylon con particolari aperture per pulizie personali, cuscino imbottito e rivetito in materiale plastico, tappi antiscivolo alla base.

Bathtub transfer bench

Realized to allow the person with short mobility to transfer independently from the wheelchair to the bathtub. Nylon seat, backrest and armrests with special openings for own cleaning. Padded cushion upholstered with plastic material, antislip plugs at the base.



GY7072

Sedia girevole per vasca

Modello regolabile per vasche da 650 mm e 800 mm di larghezza intera, sedile, schienale e braccioli in nylon anatomico con particolari aperture centrali per pulizie personali; braccioli ribaltabili per facilitare l'inserimento, girevole a 360° su cuscinetti a sfere, quattro tappi di appoggio antiscivolo e antigraffio.

Turning bathtub seat

Adjustable model for bathtubs with inner width from 650 mm to 800 mm, seat backrest made of contoured nylon with special opening in the middle for own cleaning, up-setting armrests for make easier to enter, turning at 360° on ball bearings, four support's plugs antislip and anti-scratches, folding backrest.



GY7081

Seggiolino doccia ribalta

Struttura portante in lega di alluminio Ø 30 con rinforzo interno, trattato con speciali polveri epossidiche a spessore. Possibilità di ribalta grazie a supporti girevoli in nylon, stampato su piastre di alluminio.

Up-setting stool seat

Made of aluminium alloy Ø 30 with reinforces covered, with special epoxy powders. Possibility of up-setting, thank to revolving supports, made of printed nylon on aluminium plates.



GY7082

Sedia pieghevole per doccia

Sedile, schienale e braccioli in nylon con particolari aperture per pulizie personali, agganciabile al muro a mezzo staffe di aggancio, braccioli a ribalta per facilitare l'inserimento, sedile pieghevole.

Shower folding seat

Nylon seat, backrest and armrests with special openings for own cleaning, wall mounting, up-setting armrests for easy entering, folding seat.



Particolare bracciolo.
Armrest detail



Particolare pedana.
Footrest detail.



GY7084

Poltroncina doccia

Poltroncina doccia con telaio in lega di alluminio verniciato a polveri epossidiche. Pedane girevoli, regolabili in altezza e asportabili. Braccioli in nylon stampato e ribaltabili. Particolare apertura per pulizie personali dello schienale e del sedile. N. 4 ruote, di cui 2 con freno, Ø 125 in nylon stampato su cuscinetti girevoli, in acciaio inox.

Shower Chair

Shower chair made of aluminium alloy, varnished with epoxy powders. Revolving and removable footrests, adjustable in height. Up-setting armrests in printed nylon. Special opening for own cleaning of backrest and seat. N. 4 castors, 2 with brake, Ø 125 in printed nylon on ball bearing, stainless steel made.



GY7086

Carrozzina doccia

Carrozzina doccia con telaio lega di alluminio verniciato a polveri epossidiche. Pedane girevoli, regolabili in altezza e asportabili. Braccioli in nylon stampato e ribaltabili. Particolare apertura per pulizie personali dello schienale e del sedile. N. 2 ruote anteriori in nylon stampato, girevoli su cuscinetti e perni in acciaio inox. N. 2 ruote posteriori Ø 600 in nylon stampato, completo di corrimano per auto spinta. N. 2 freni di stazionamento (possibilità di variare l'assetto della carrozzina, mediante spostamento assi delle ruote).

Shower Wheelchair

Shower wheelchair with aluminium alloy frame, varnished with epoxy powders. Revolving and removable footrests, adjustable in height. Up-setting armrests in printed nylon. Special opening of the backrest and seat, for own cleaning. 2 front castors in printed nylon, revolving on ball bearing and pins in stainless steel. 2 rear castors Ø 600 made of printed nylon, complete of self propelling handrail. 2 parking brakes (possibility of change the shower chair set up, through axle moving of wheels axes).



GY7097

Tappo di chiusura.
Hygienic Bowl with Lid.



GY7087

Dispositivo W.C.
Completo di vaso igienico asportabile con coperchio a chiusura idraulica.

WC Device
Complete of removable hygienic bowl with lid moved from an hydraulic closing.



GY7085

Poltroncina doccia
Poltroncina doccia con telaio in lega di alluminio verniciato a polveri epossidiche con parti stampate. Pedane girevoli, regolabili in altezza e asportabili. Braccioli in nylon stampato e ribaltabili. Sedile e schienale in poliuretano stampato e indeformabile morbido, con apertura anteriore e possibilità di inserire tappo di chiusura. Particolare apertura per pulizie personali del sedile. N. 4 ruote, di cui due con freno, Ø 125 in nylon stampato su cuscinetti girevoli, in acciaio inox.

Shower Chair
Shower chair made of aluminium alloy, varnished with epoxy powders, with printed parts. Revolving and removable footrests, adjustable in height. Up-setting armrests in printed nylon. Seat and backrest made of polyurethane material, crush-proof and soft with front openings and the possibility to insert hygienic bowl with lid. Special opening for own cleaning of seat. N. 4 castors, two with brake, Ø 125 in printed nylon on ball bearing, stainless steel made.




GY7096

Carrozzina doccia
Carrozzina doccia con telaio lega di alluminio verniciato a polveri epossidiche con parti stampate. Pedane girevoli, regolabili in altezza e asportabili. Braccioli in nylon stampato e ribaltabili. Sedile e schienale in poliuretano stampato e indeformabile morbido, con apertura anteriore e possibilità di inserire tappo di chiusura. N. 2 ruote anteriori in nylon stampato, girevoli su cuscinetti e perni in acciaio inox. N. 2 ruote posteriori Ø 600 in nylon stampato, completo di corrimano per auto spinta. N. 2 freni di stazionamento (possibilità di variare l'assetto della carrozzina, mediante spostamento assi delle ruote).

Shower Wheelchair
Shower wheelchair made of aluminium alloy frame, varnished with epoxy powders with printed parts. Revolving and removable footrests, adjustable in height. Up-setting armrests in printed nylon. Seat and backrest made of printed polyurethane material, crush-proof and soft with front openings and possibility to insert hygienic bowl with lid. N. 2 front castors in printed nylon, revolving on ball bearing and pins in stainless steel. 2 rear castors Ø 600 made of printed nylon, complete of self propelling handrail. 2 parking brakes (possibility of change the shower chair set up, through axle moving of wheels axles).


AUSILI PER BAGNO E CORRIMANO

bathroom equipments and handrails

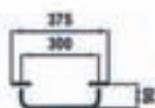


GY7000

Kg. 0.24
MC 0.002

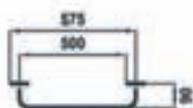


GY7002

Kg. 0.34
MC 0.003

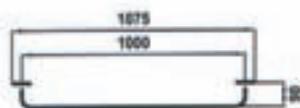

GY7004

Kg. 0.6
MC 0.007

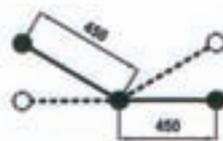

GY7006

Kg. 0.6
MC 0.007




GY7016 sx

Kg. 0.7
MC 0.009




GY7020

Kg. 0.7
MC 0.009

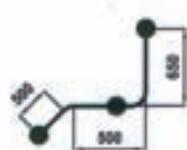


GY7022 dx

Kg. 0.86
MC 0.011

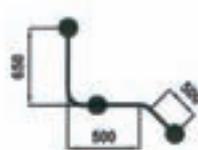


GY7022 sx

Kg. 0.86
MC 0.011

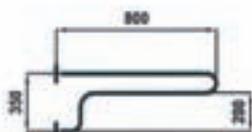


GY7032

Kg. 0.95
MC 0.011

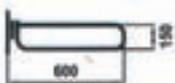


GY7034

Kg. 1.2
MC 0.009

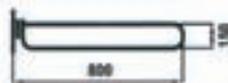

GY7036

Kg. 1.4
MC 0.011

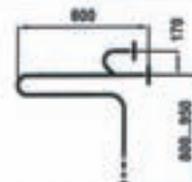

GY7040

Kg. 1.3
MC 0.04




GY7052

Kg. 5.5
MC 0.22




GY7054

Kg. 8
MC 0.19

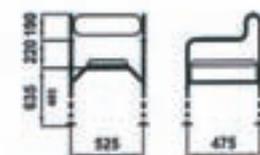


GY7056

Kg. 7
MC 0.25

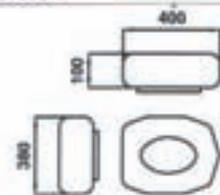


GY7057

Kg. 1.6
MC 0.018

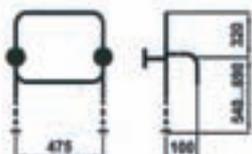

GY7066

Kg. 2
MC 0.042

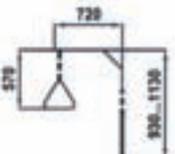

GY7068

Kg. 2.6
MC 0.003




GY7070

Kg. 2.8
MC 0.09



GY7071

Kg. 4.8
MC 0.17

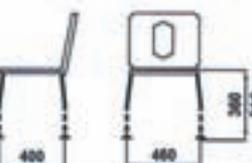


GY7080

Kg. 4.5
MC 0.24




GY7081

Kg. 3
MC 0.033

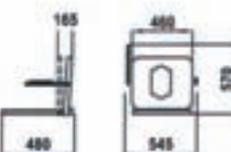

GY7082

Kg. 5.4
MC 0.052

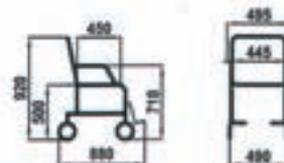

GY7084

Kg. 12.5
MC 0.25






GY7014 dx

Kg. 0.42
MC 0.005



GY7012 sx

Kg. 0.42
MC 0.005

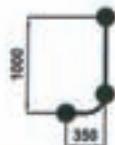


GY7018

Kg. 0.7
MC 0.009




GY7088

Kg. 1.85
MC 0.001

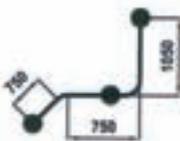


GY7024 dx

Kg. 1.25
MC 0.011

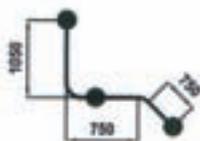


GY7024 sx

Kg. 1.25
MC 0.011

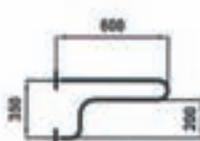


GY7030 dx

Kg. 0.8
MC 0.009

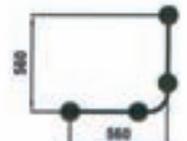


GY7090 sx

Kg. 1.1
MC 0.008

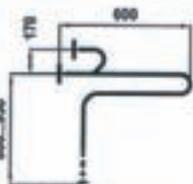


GY7044 dx

Kg. 1.3
MC 0.04

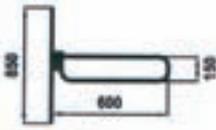


GY7048

Kg. 2.8
MC 0.01

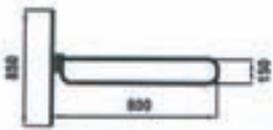


GY7050

Kg. 3
MC 0.012

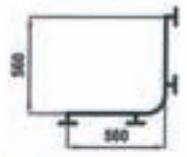


GY7092

Kg. 1.6
MC 0.008

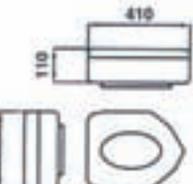


GY7059

Kg. 2.0
MC 0.026

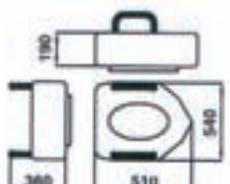


GY7061

Kg. 6.5
MC 0.057

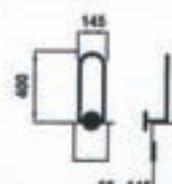


GY7064

Kg. 2.52
MC 0.04

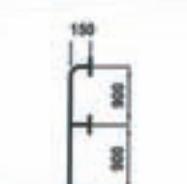


GY7094

Kg. 1.85
MC 0.008

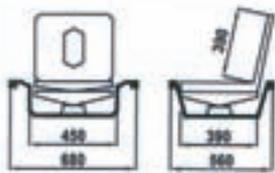

GY7072

Kg. 10
MC 0.12

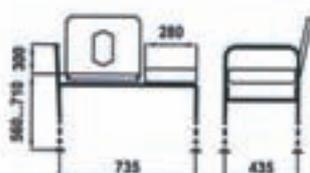

GY7076

Kg. 9
MC 0.3




GY7078

Kg. 2.6
MC 0.06




GY7096

Kg. 1.90
MC 0.008

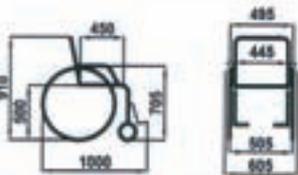


GY7086

Kg. 20
MC 0.28

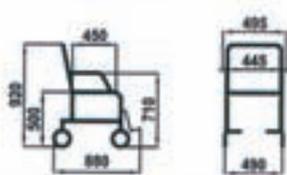

GY7085

Kg. 12.5
MC 0.25

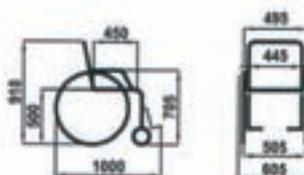

GY7096

Kg. 20
MC 0.28

"Modulo" e Bagno

La linea "Modulo e Bagno" che la GIVAS vi propone è frutto di una lunga esperienza nella produzione di corrimano perimetrali.

Strutture: giunti in lega di alluminio pressofuso, per bagno tubo longitudinale in alluminio estruso a freddo; per corridoi in tubo di acciaio laminato a freddo. Verniciatura con polveri epossidiche a fuoco a 250°C.

Colori a richiesta, vedere tabelle colori.

"Modulo" and Bathroom

The line "Modulo" that GIVAS propose is the result of a long experience in the production of perimetrical handrails.

Structure: joint made of an aluminium alloy; for bathroom, longitudinal tube made of cold laminated steel tubing.

Polishing with epoxy powders. Colours on request; see colours schedule.



GY7090

Corrimano doccia verticale ad angolo

Struttura in tubo di alluminio Ø 35x1,5. Particolari di giuntura in alluminio pressofuso, copriviti. Colori a scelta.

Angled upright shower handrail

Made of aluminium tubing Ø 35x1,5 aluminium joints, knobs covering screws. Colours on choice.



GY7088

Corrimano doccia a doppio angolo

Struttura in tubo di alluminio Ø 35x1,5. Particolari di giuntura in alluminio pressofuso, copriviti. Colori a scelta.

Double angled shower handrail

Made of aluminium tubing Ø 35x1,5 aluminium joints, knobs covering screws. Colours on choice.



GY7094

Corrimano doccia verticale

Struttura in tubo di alluminio Ø 35x1,5. Particolari di giuntura in alluminio pressofuso, copriviti. Colori a scelta.

Upright shower handrail

Made of aluminium tubing Ø 35x1,5 aluminium joints, knobs covering screws. Colours on choice.



GY7092

Corrimano doccia orizzontale ad angolo

Struttura in tubo di alluminio Ø 35x1,5. Particolari di giuntura in alluminio pressofuso, copriviti. Colori a scelta.

Angled horizontal shower handrail

Made of aluminium tubing Ø 35x1,5 aluminium joints, knobs covering screws. Colours on choice.



MODULO













21.00
21.02

GY2100

Modulo in acciaio verniciato
Modulo made of varnished steel

GY2102

Modulo in alluminio verniciato
Modulo made of varnished aluminium

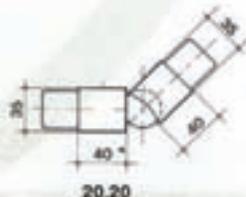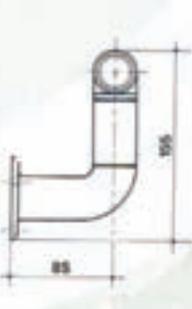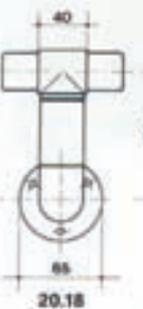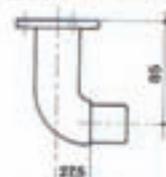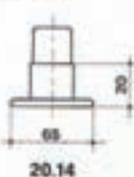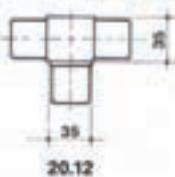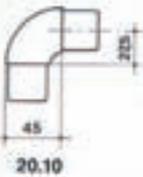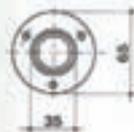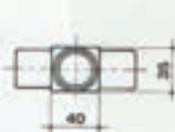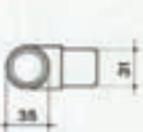

Colori / Colours



GIALLO / YELLOW



ARANCIO / ORANGE



ROSSO / RED




AZZURRO / BLEU



VERDE / GREEN




MARRONE / BROWN

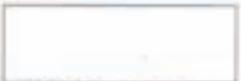


BIANCO / WHITE



GRIGIO / GREY

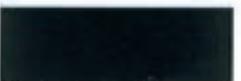

NERO / BLACK

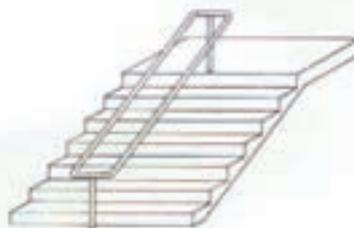



ISO 9002:1994
Registered QMS



Accredited by the Italian Council
for Accreditation



35020 SAONARA Z.A.I. (Padova)
V.le Veneto, 2
Tel. +39 049 8790199
Fax +39 049 8790711
<http://www.givas.it>
info@givas.it

GIVAS

Arredi per Ospedali e Comunità
Furnitures for Hospitals and Communities

L'Azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso. Si riserva inoltre la proprietà dei modelli con divieto di riprodurli anche parzialmente.
The firm reserve the right to make modifications and improvements without previous notice. Reserve also the right of partial reproduction.